



PRO SYSTEM

dental implant

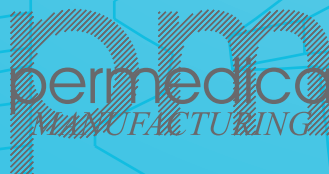

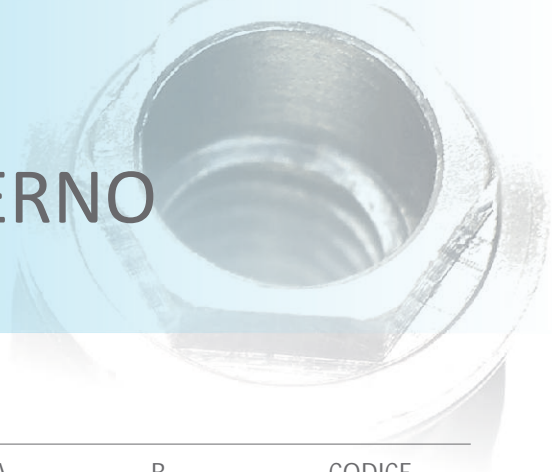

IMPIANTI CONICI

		H mm	A mm	B mm	CODICE
Ø 4.00		8,5	Ø 3.85	Ø 4.0	KE 4008
		10	Ø 3.85	Ø 4.0	KE 4010
		12	Ø 3.85	Ø 4.0	KE 4012
		15	Ø 3.85	Ø 4.0	KE 4015

Ø 4.75		8,5	Ø 4.6	Ø 4.0	KE 4708
		10	Ø 4.6	Ø 4.0	KE 4710
		12	Ø 4.6	Ø 4.0	KE 4712
		15	Ø 4.6	Ø 4.0	KE 4715

IMPIANTI CILINDRICI

		H mm	A mm	B mm	CODICE
Ø 3.30		8,5	Ø 3.30	Ø 4.0	CE 3308
		10	Ø 3.30	Ø 4.0	CE 3310
		12	Ø 3.30	Ø 4.0	CE 3312
		15	Ø 3.30	Ø 4.0	CE 3315

Ø 3.85		8,5	Ø 3.85	Ø 4.0	CE 3808
		10	Ø 3.85	Ø 4.0	CE 3810
		12	Ø 3.85	Ø 4.0	CE 3812
		15	Ø 3.85	Ø 4.0	CE 3815

Ø 4.10		6,0	Ø 4.10	Ø 4.0	CE 4106
		8,5	Ø 4.10	Ø 4.0	CE 4108
		10	Ø 4.10	Ø 4.0	CE 4110
		12	Ø 4.10	Ø 4.0	CE 4112
		15	Ø 4.10	Ø 4.0	CE 4115

Ø 5.25		8,5	Ø 5.25	Ø 4.0	CE 5206
		10	Ø 5.25	Ø 4.0	CE 5208
		12	Ø 5.25	Ø 4.0	CE 5210
		15	Ø 5.25	Ø 4.0	CE 5212

02 / MOUNTER



Il Mouter-Transfer è uno strumento multifunzione che viene utilizzato come:

- strumento per il trasporto dell'impianto dall'ampolla al sito implantare;
- transfer da impronta;
- moncone provvisorio o definitivo.

Nel caso delle seguenti procedure operatorie:

- standard a doppia o singola fase chirurgica;
- carico immediato;
- casi post-estrattivi;
- tecniche di rialzo del seno mascellare.

MTA (Mouter Transfer Abutment)

Codice

Profilo gengivale Ø 5.0 mm

PEM TA

Profilo gengivale Ø 6.0 mm

PEM TA 6

Vite per mouter

PE VT



TAPPO
ERMETICO




SOSPENSORE
IN TITANIO

PRIMO
CONTENITORE

CONTENITORE
PER VITE

POSIZIONAMENTO DELL' IMPIANTO (Coppia max 55N-cm)
Velocità 25 - 55 giri/min

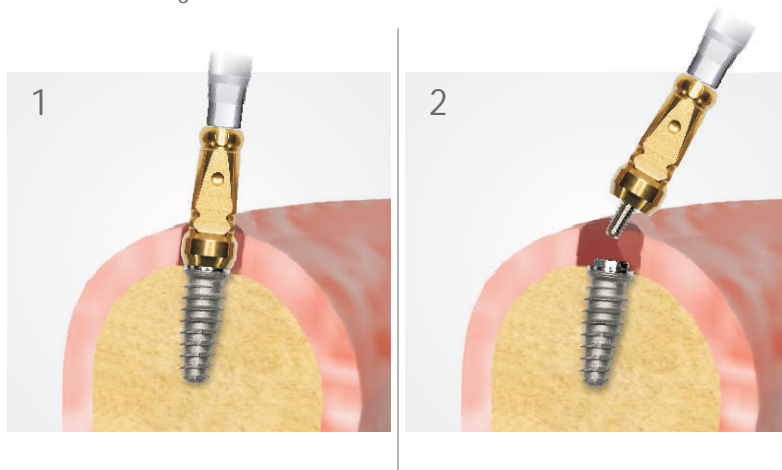

A discrezione del medico dentista è possibile effettuare il raffreddamento con fisiologica.

L'inserimento dell'impianto con tecnica manuale o meccanica potrebbe richiedere una chiusura finale con l'ausilio della chiave a cricchetto.

Prima di inserire l'impianto lavare e far sanguinare il sito ricevente, quindi inserire.

Gli impianti sono forniti già pre-assemblati con il Mouter-Transfer.

Il colore dorato del Mouter garantisce massimi risultati estetici della ricostruzione.



Pilastro di guarigione	Codice
H.2mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 402
H.4mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 404
H.6mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 406
H.3mm - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 503
H.5mm - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 505



Pilastri di guarigione

Monconi	Codice
Dritto H.2 mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 408
Dritto H.4 mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 409
Dritto H.3 mm - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 508
Angolato 15° - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 415
Angolato 25° - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 425
Angolato 15° - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 515
Calcinabile antirotazionale - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 410
Calcinabile rotante - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 411
Provvisorio estetico - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 440



Monconi dritti


Monconi angolati



Monconi calcinabili


Monconi estetici

Moncone a sfera Ø 2.5 mm	Codice
H. 1 mm - profilo gengivale Ø 4.5 mm	PE 421
H. 2 mm - profilo gengivale Ø 4.5 mm	PE 422
H. 4 mm - profilo gengivale Ø 4.5 mm	PE 424

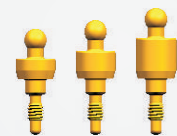

Monconi a sfera

Pilastro Equator	Codice
H. 2 mm - profilo gengivale Ø 4.0 mm	PEEQT 02
H. 4 mm - profilo gengivale Ø 4.0 mm	PEEQT 04
H. 6 mm - profilo gengivale Ø 4.0 mm	PEEQT 06

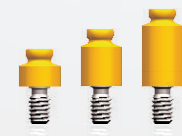

Pilastrri Equator

Analogo per laboratorio	Codice
Analogo	PE 400



Analogo

Vite per
MounterVite per
Moncone

Viti	Codice
Vite di ricambio per Mounter	PE VT
Vite di ricambio per moncone	PE VTG
Vite lunga per Transfer	PE VTL

Vite lunga
per Transfer



Pilastro di guarigione	Codice
H.2mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 402 ●
H.4mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 404 ●
H.6mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 406 ●
H.3mm - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 503 ●
H.5mm - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 505 ●



Pilastri di guarigione

Monconi	Codice
Dritto H.2 mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 408 ●
Dritto H.4 mm - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 409 ●
Dritto H.3 mm - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 508 ●
Angolato 15° - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 415 ●
Angolato 25° - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 425 ●
Angolato 15° - profilo gengivale Ø 6.0mm	PE 515 ●
Calcinabile antirotazionale - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 410 ●
Calcinabile rotante - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 411 ●
Provvisorio estetico - profilo gengivale Ø 5.0mm	PE 440 ●




Monconi dritti

Monconi angolati

Monconi calcinabili


Monconi estetici

Moncone a sfera Ø 2.5 mm	Codice
H. 1 mm - profilo gengivale Ø 4.5 mm	PE 421 ●
H. 2 mm - profilo gengivale Ø 4.5 mm	PE 422 ●
H. 4 mm - profilo gengivale Ø 4.5 mm	PE 424 ●

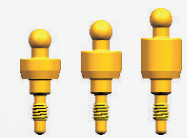

Monconi a sfera

Pilastro Equator	Codice
H. 2 mm - profilo gengivale Ø 4.0 mm	PEEQT 02 ●
H. 4 mm - profilo gengivale Ø 4.0 mm	PEEQT 04 ●
H. 6 mm - profilo gengivale Ø 4.0 mm	PEEQT 06 ●

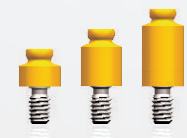

Pilastrri Equator

Analogo per laboratorio	Codice
Analogo	PE 400 ●



Analogo


Viti	Codice
Vite di ricambio per Mounter	PE VT
Vite di ricambio per moncone	PE VTG
Vite lunga per Transfer	PE VTL



Vite per Mounter



Vite per Moncone

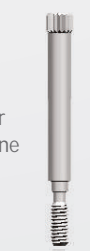

Vite lunga per Transfer

MOUNTER



MOUNTER
+
IMPIANTO

PRO SYSTEM

dental implant

IMPIANTO
ESAGONO ESTERNO

